

Swift™ LT

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

TOQUE SUAVE, AJUSTE FÁCIL

Produzida pela líder de mercado em almofadas nasais, a Swift™ LT representa uma revolução em tecnologia de almofadas nasais. De toque suave, fácil de ajustar e hipersilenciosa, a Swift LT oferece conforto, estabilidade e desempenho superiores para maximizar a adesão do paciente.

- **Toque suave:** sem suporte para a testa e pesando apenas 67 g, a Swift LT veda de forma suave e segura para garantir uma confortável noite de sono.
- **Ajuste fácil:** o tambor giratório permite que o usuário personalize a vedação, e o design simples facilita o ajuste e a limpeza.
- **Conforto hipersilencioso:** o mais silencioso sistema de almofadas nasais do mercado, e 71% mais silencioso que a Mirage™ Swift II.*
- **Compacta e estável:** ideal para dormir de lado, a largura da armação de máscara da Swift LT é 50% menor que a da Mirage Swift II.

Almofadas nasais de parede dupla

Vedação suave para maior estabilidade, conforto e menor fluxo de ar para o interior dos dutos nasais

Base flexível das almofadas

Permite que as almofadas nasais se movimentem em várias direções sem comprometer a vedação

Design de respirador silencioso

Dispersa o ar suavemente para longe do paciente e do parceiro

Tubo leve e flexível

Minimiza a tensão sobre a máscara, permitindo mais movimento enquanto mantém as almofadas no lugar



Retentor de tubo opcional

Permite que o tubo seja usado sobre a cabeça ou de ambos os lados do rosto, sem impedir que o usuário durma de lado



Arnês com fivela macia

Permite ajustes fáceis

Braços de estabilidade do arnês

Expansível para acomodar rostos de várias larguras, inclusive estreitos ou largos

Tambor giratório patenteado

Ajusta as almofadas no ângulo mais conveniente e permanece no lugar para garantir uma vedação confortável e segura

DESTAQUES TECNOLÓGICOS

Tambor giratório com almofadas nasais de parede dupla


O Swift LT é o único sistema de almofadas nasais do mercado equipado com tambor giratório patenteado e almofadas de parede dupla que podem ser ajustados para acomodar vários ângulos nasais.



As almofadas de parede dupla se apoiam sobre uma base flexível, permitindo movimento vertical e lateral sem comprometer a vedação, e são projetadas para reduzir sintomas de ressecamento através da limitação do ar que penetra pelas narinas. Além disso, a almofada externa se infla de ar enquanto a interna oferece apoio macio e estável.

Comparação acústica*

Com os novos respiradouros, o Swift LT é o sistema de almofadas nasais mais silencioso do mercado.

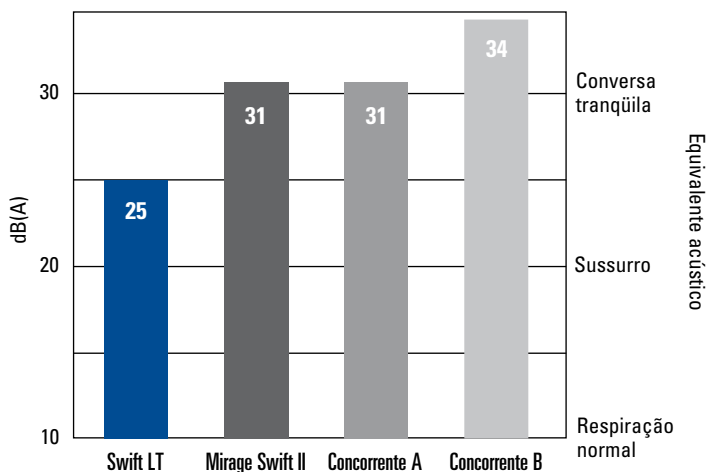

Teste segundo ISO 3744:1994: determinação acústica de níveis de intensidade do som de fontes de ruído que utilizam pressão a 10 cm H₂O.

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

Toque suave

- Design compacto e elegante
- Leve sobre o rosto sem comprometer a vedação e a estabilidade
- Sem necessidade de suporte para a testa

Ajuste personalizado

- Tambor giratório garante um ajuste perfeito todas as vezes
- Opções de posição para dormir (de lado e de costas) com retentor de tubo opcional

Fácil de usar

- Ajuste de primeira com almofadas flexíveis de parede dupla
- Fácil de limpar e montar

Conforto discreto

- Design do respirador dispersa o ar para longe do parceiro
- 71% mais silenciosa que a Mirage Swift II*

VANTAGENS PROFISSIONAIS

Fácil de ajustar

- Ajuste de primeira para a maioria dos usuários
- Três tamanhos de almofadas se ajustam a mais de 95% dos usuários**

Eficiência de custo e tempo

- Menor estoque com três tamanhos incluídos em um código de produto
- Menos retorno do paciente ao consultório e menor tempo de ajuste/treinamento

Satisfação e adesão do paciente

- Menos peças para facilitar a limpeza e a montagem
- Menor tempo de ajuste e treinamento
- Resulta em maior adesão e satisfação do paciente

Swift LT

Sistema de almofadas nasais

(inclui 3 tamanhos de almofadas: Pequena, Média e Grande)

Código do produto:

EUA, Canadá e América Latina

60560

Códigos de reembolso Medicare (somente EUA)

Sistemas de Almofadas Nasais Swift LT

| HCPCS | Descrição do código |
|-------|---|
| A7034 | Máscara nasal ou dispositivo de aplicação do tipo cânula, utilizado com dispositivo de pressão positiva das vias respiratórias (PAP), um por três meses |
| A7035 | Arnês utilizado com dispositivo de pressão positiva das vias respiratórias, um por seis meses |
| A7033 | Almofadas de reposição para dispositivo de aplicação nasal, 2 pares por mês |

*Teste segundo ISO 3744:1994: determinação acústica de níveis de intensidade do som de fontes de ruído que utilizam pressão a 10 cm H₂O. As comparações percentuais citadas são calculadas através da conversão dos valores de intensidade do som de uma escala logarítmica em uma escala linear

**Com base no banco de dados antropométricos da ResMed